



# KERN CPB

Versión 1.1 5/2006

## Instrucciones de servicio

### Balanza contadora

#### Índice

<b>1</b>	<b>Datos técnicos</b>	<b>88</b>
<b>2</b>	<b>Declaración de conformidad</b>	<b>89</b>
<b>3</b>	<b>Vista de conjunto del aparato</b>	<b>90</b>
3.1	Resumen de las indicaciones	91
3.1.1	Indicación peso	91
3.1.2	Indicación peso referencial	91
3.1.3	Indicación número de piezas	91
3.2	Vista general del teclado	92
<b>4</b>	<b>Indicaciones fundamentales (Generalidades)</b>	<b>93</b>
4.1	Uso conforme a las normas	93
4.2	Uso inapropiado	93
4.3	Garantía	93
4.4	Control de medios de ensayo	94
<b>5</b>	<b>Indicaciones de seguridad básicas</b>	<b>94</b>
5.1	Observar las instrucciones de servicio	94
5.2	Formación del personal	94
<b>6</b>	<b>Transporte y almacenaje</b>	<b>94</b>
6.1	Control en el momento de entrega del aparato	94
6.2	Embalaje	94
<b>7</b>	<b>Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha</b>	<b>95</b>
7.1	Lugar de emplazamiento, lugar de uso	95
7.2	Desempaquetar	95
7.2.1	Emplazamiento	95
7.2.2	Volumen de entrega	96
7.3	Conexión a la red	96
7.4	Funcionamiento con acumulador	96
7.5	Conexión de aparatos periféricos	96
7.6	Primera puesta en servicio	96
7.7	Ajuste con peso externo	97

<b>8</b>	<b><i>Pesaje</i></b>	<b>99</b>
8.1	Conectar/desconectar y poner en cero	99
8.2	Pesaje simple	99
8.3	Pesaje con tara	100
8.3.1	Averiguar el peso tara mediante pesaje	100
8.3.2	Entrada numérica del peso de tara	101
<b>9</b>	<b><i>Contaje de piezas</i></b>	<b>102</b>
9.1	Averiguar el peso referencial mediante pesaje	102
9.2	Entrada numérica del peso referencial	103
9.3	Optimización referencial automática	103
9.4	Control de tolerancia al contar piezas	104
9.5	Almacén manual de sumas	104
9.6	Almacén automático de sumas	105
<b>10</b>	<b><i>Menú</i></b>	<b>106</b>
10.1	Navegación en el menú	106
10.2	Vista de conjunto del menú	108
<b>11</b>	<b><i>Iluminación del fondo de la indicación</i></b>	<b>109</b>
<b>12</b>	<b><i>Salida de datos RS 232 C</i></b>	<b>110</b>
12.1	Datos técnicos	110
12.2	Dotación de los pines del conector salida de la balanza (vista frontal)	110
12.3	Formato de datos	110
<b>13</b>	<b><i>Mantenimiento, conservación, eliminación</i></b>	<b>111</b>
13.1	Limpiar	111
13.2	Mantenimiento, conservación	111
13.3	Remoción	111
<b>14</b>	<b><i>Pequeño servicio de auxilio</i></b>	<b>112</b>

## 1 Datos técnicos

<b>KERN</b>	<b>CPB 3K0.1</b>	<b>CPB 6K0.2</b>	<b>CPB 15K0.5</b>	<b>CPB 30 K1</b>
<i>Lectura (d)</i>	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
<i>Gama de pesaje (max)</i>	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
<i>Reproducibilidad</i>	0,1 g	0,2 g	0,5 g	1 g
<i>Linearidad</i>	± 0,4 g	± 0,8 g	± 1,5 g	± 3 g
<i>Tiempo de estabilización</i>	2 sec.	2 sec.	2 sec.	2 sec.
<i>Peso de ajuste recomendado (no adjunto)</i>	3 kg (M1)	5 kg (M1)	10 kg (M1)	20 kg (M1)
<i>Unidad de pesaje</i>	g	g	kg	kg
<i>Peso mínimo de pieza</i>	0,05 g	0,1 g	0,25 g	0,5 g
<i>Cantidad referencial</i>	libremente seleccionable			
<i>Peso neto (kg)</i>	4,1 kg			
<i>Temperatura ambiente</i>	permisible -10° C a 40° C			
<i>Humedad del aire</i>	max. 80 % relativo (no condensado)			
<i>Platillo de pesaje, acero inoxidable</i>	225 x 275 mm			
<i>Dimensiones de la carcasa (A x P x a)</i>	315 x 355 x 110 mm			
<i>Tipo de protección</i>	IP54			
<i>Conexión a la red</i>	Adaptador de red 230 V, 50/60 Hz; balanza 9 V DC, 800 mA			
<i>Acumulador</i>	Periodo de funcionamiento aprox. 70 horas / tiempo de carga aprox. 12 horas			

## 2 Declaración de conformidad



**KERN & Sohn GmbH**

D-72322 Balingen-Frommern

Postfach 4052

E-Mail: [info@kern-sohn.de](mailto:info@kern-sohn.de)

Tel: 0049-[0]7433- 9933-0

Fax: 0049-[0]7433-9933-149

Internet: [www.kern-sohn.de](http://www.kern-sohn.de)

## Declaración de conformidad

**Declaration of conformity for apparatus with CE mark**

**Konformitätserklärung für Geräte mit CE-Zeichen**

**Déclaration de conformité pour appareils portant la marque CE**

**Declaración de conformidad para aparatos con marca CE**

**Dichiarazione di conformità per apparecchi contrassegnati con la marcatura CE**

<b>English</b>	We hereby declare that the product to which this declaration refers conforms with the following standards.
<b>Deutsch</b>	Wir erklären hiermit, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Normen übereinstimmt.
<b>Français</b>	Nous déclarons avec cela responsabilité que le produit, auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes citées ci-après.
<b>Español</b>	Manifestamos en la presente que el producto al que se refiere esta declaración está de acuerdo con las normas siguientes
<b>Italiano</b>	Dichiariamo con ciò che il prodotto al quale la presente dichiarazione si riferisce è conforme alle norme di seguito citate.

## Electronic Scale: KERN CPB

Mark applied	EU Directive	Standards
	89/336/EEC EMC	EN 50081-1 EN 50082-1
	73/23/EEC Low Voltage	EN 60950

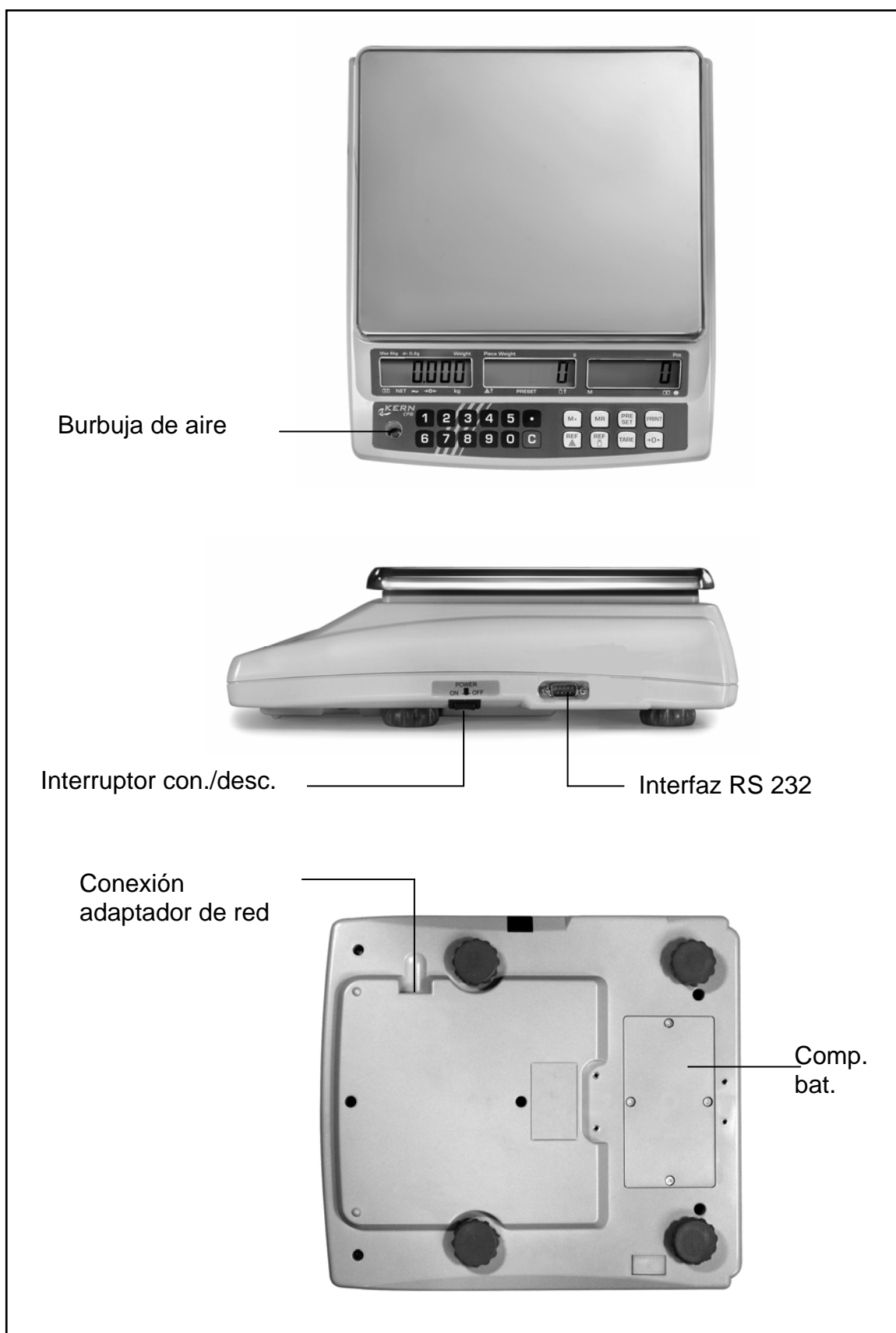
Date: 27.12.2005

Signature: \_\_\_\_\_

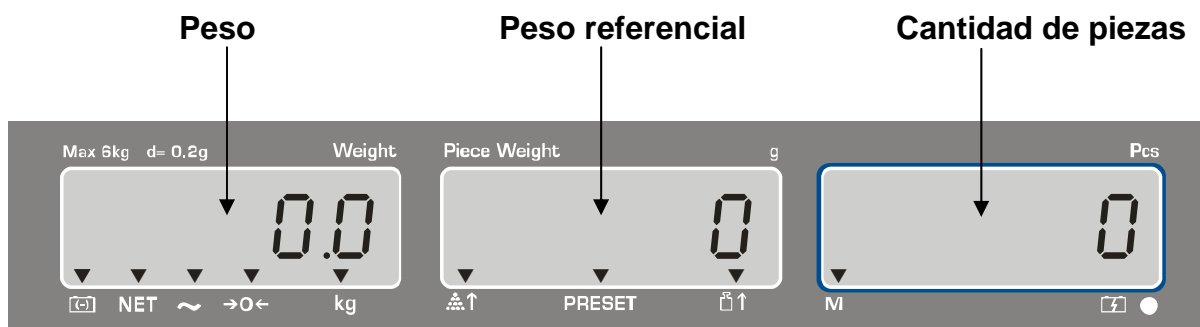
Gottl. KERN & Sohn GmbH  
Management

Gottl. KERN & Sohn GmbH, Ziegelei 1, D-72336 Balingen, Tel. +49-[0]7433/9933-0, Fax +49-[0]7433/9933-149

### 3 Vista de conjunto del aparato






### 3.1 Resumen de las indicaciones



#### 3.1.1 Indicación peso

Aquí se indica el peso de su material a pesar.



**Las flechas sobre los símbolos indican:**

	Capacidad el acumulador agotada dentro de breve tiempo
<b>NET</b>	Peso neto
	Indicación de estabilidad
	Indicación de posición cero
<b>kg</b>	Kilograma

#### 3.1.2 Indicación peso referencial

Aquí se indica el peso referencial de una muestra en [g]. Este valor o es entrado por el usuario o es calculado por la balanza.

**Las flechas sobre los símbolos indican:**

	Número de piezas puestas insuficiente
<b>PRESET</b>	Valor límite memorizado
	Peso referencial puesto insuficiente

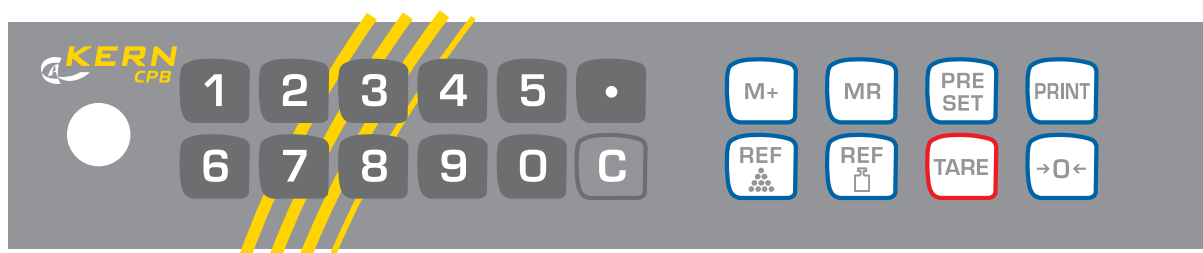
#### 3.1.3 Indicación número de piezas

Aquí se indican inmediatamente todas las piezas puestas como cantidad.

**Las flechas sobre los símbolos indican:**

<b>M</b>	Datos en la memoria
----------	---------------------

### 3.2 Vista general del teclado



Selección	Función
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teclas cifra</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecla de borrar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adición en el almacén de somas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Llamada almacén de somas</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada / indicador valor límite en control de tolerancia</li> <li>Llamada menú "Iluminación del fondo del indicador"</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Emisión a un aparato externo (impresora) o a un PC</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada peso referencial mediante pesaje</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrada numérica peso referencial</li> <li>Selección de funciones / parámetros</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecla de taraje</li> <li>Memorizar</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecla de poner a cero</li> <li>Regresar al modo de pesaje</li> </ul>

## **4 Indicaciones fundamentales (Generalidades)**

### **4.1 Uso conforme a las normas**

La balanza que usted adquirió sirve para determinar el peso de material de pesaje. Esta balanza ha sido diseñada como „balanza no automática“, es decir que el material de pesaje se tiene que colocar de manera manual y cuidadosa en el centro del platillo de pesaje. En cuanto se obtenga un valor de pesaje estable, se puede proceder a leer el valor indicado por la balanza.

### **4.2 Uso inapropiado**

La balanza no se puede utilizar para efectuar pesajes dinámicos. ¡Si se retiran o añaden pequeñas cantidades al material de pesaje, es posible que la balanza indique valores de pesaje equivocados como consecuencia de la función de „compensación de estabilidad“ integrada en el aparato! (Ejemplo: la salida lenta de un líquido que se encuentre sobre la balanza dentro de un recipiente.)

Evitar que el platillo de pesaje esté expuesto a una carga continua. Esto podría dañar el mecanismo medidor de la balanza.

También es sumamente importante evitar que la balanza sea expuesta a golpes y sobrecargas superiores a la carga máxima permisible (máx.) teniéndose en cuenta una carga de tara eventualmente ya existente. Esto podría averiar la balanza.

Nunca utilizar la balanza en lugares potencialmente explosivos. Los modelos fabricados en serie no están protegidos contra explosión.

No está permitido modificar la construcción de la balanza. Esto podría provocar resultados de pesaje falsos, deficiencias en la seguridad de la balanza o la destrucción de la misma.

La balanza sólo se debe utilizar en conformidad con las especificaciones descritas aquí. Si se desea utilizar la balanza en otros campos de aplicación, se requiere una autorización escrita de parte de la empresa KERN.

### **4.3 Garantía**

El derecho de garantía queda excluido en los siguientes casos:

- Inobservancia de las especificaciones contenidas en estas instrucciones de servicio
- Utilización de la balanza fuera de los campos de aplicación descritos
- Modificación o apertura del aparato
- Deterioro mecánico y danificación por medios, líquidos y desgaste natural
- Emplazamiento e instalación eléctrica realizados inadecuadamente
- Sobrecarga del mecanismo medidor



#### **4.4 Control de medios de ensayo**

En el marco de aseguramiento de calidad es necesario que se controlen con regularidad las cualidades de medición de la balanza así como la aptitud de una eventual pesa de calibración. El usuario responsable tiene que determinar el intervalo adecuado así como el tipo y las dimensiones de este control. Para más información sobre el control de medios de ensayo de balanzas así como sobre las pesas de calibración requeridas para tal efecto, véase la página web de la empresa KERN ([www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)). En el acreditado laboratorio de calibración DKD de la empresa KERN es posible calibrar balanzas y pesas de calibración de una manera rápida y rentable (aquí se realiza el ajuste a la medida normal válida a nivel nacional).

### **5 Indicaciones de seguridad básicas**

#### **5.1 Observar las instrucciones de servicio**

Lea las instrucciones de servicio detenidamente antes de proceder con el emplazamiento y la puesta en marcha de la balanza, incluso si ya tiene cierta experiencia con balanzas de la marca KERN.

#### **5.2 Formación del personal**

Sólo personal debidamente capacitado debe manejar y cuidar estos aparatos.

### **6 Transporte y almacenaje**

#### **6.1 Control en el momento de entrega del aparato**

Por favor, controlar en el momento de entrega de la balanza si el embalaje o el aparato muestran algún daño externo visible.

#### **6.2 Embalaje**

Guarde todas las partes del embalaje original para el eventual caso de tener que devolver el aparato.

Sólo utilizar el embalaje original para la devolución del aparato.

Retire todos los cables conectados así como todas las piezas sueltas o movibles antes de enviar el aparato.

Vuelva a montar los seguros de transporte. Asegure todas las piezas, como p.ej. la placa de pesaje o la fuente de alimentación, contra posibles movimientos y, por consiguiente, contra daños.

## **7 Desembalaje, emplazamiento y puesta en marcha**

### **7.1 Lugar de emplazamiento, lugar de uso**

La balanza está construida de tal forma que siempre se obtendrá resultados de pesaje fiables, siempre y cuando el pesaje se realice bajo condiciones de uso habituales.

Usted podrá trabajar con rapidez y exactitud si elige el lugar de emplazamiento ideal para su balanza.

***Por eso debe observar los siguientes puntos respecto al lugar de emplazamiento:***

- Colocar la balanza sobre una superficie sólida y plana
- No colocarla junto a una calefacción así como fluctuación de temperatura por exponerla a la radiación solar para evitar que se caliente demasiado
- Proteger la balanza contra corrientes de aire dejando ventanas y puertas cerradas
- Evitar sacudidas de la balanza durante el proceso de pesaje:
- Proteger la balanza contra polvo, vapores y una humedad del aire demasiado alta;
- No exponer el aparato a una fuerte humedad por tiempo prolongado. Se pueden formar gotas de rocío (condensación de la humedad del aire en el aparato), cuando se coloque un aparato frío en un entorno mucho más caliente. En este caso hay que dejar que el aparato se aclimatice a la temperatura ambiente durante aprox. unas dos horas sin conectarlo a la red.
- Evitar la carga electrostática del material y del recipiente de pesaje.

En caso de existir campos electromagnéticos o producirse corrientes de cargas electrostáticas así como alimentación de corriente inestable pueden haber grandes divergencias en los valores de medición indicados por la balanza (resultados de pesaje falsos). En este caso se tiene que emplazar el aparato en otro lugar.

### **7.2 Desempaquetar**

Extraer cuidadosamente la balanza del embalaje, sacar la funda de plástico y colocarla en el lugar previsto.

#### **7.2.1 Emplazamiento**

Nivelar la balanza con ayuda de los tornillos nivelantes en los pies hasta que la burbuja de aire del nivel de burbuja se encuentre dentro de las respectivas marcas.

## 7.2.2 Volumen de entrega

### **Componentes de serie:**

- Balanza
- Platillo de pesaje
- Adaptador de red
- Capota protectora de trabajo
- Batería interna
- Instrucciones de servicio

## 7.3 Conexión a la red

La balanza es alimentada con corriente a través de una fuente de alimentación externa. La tensión especificada en el rótulo de la fuente de alimentación debe coincidir con la tensión proporcionada por la red local.


Use exclusivamente fuentes de alimentación originales de KERN. Para el uso de otros modelos se requiere la autorización de parte de la empresa KERN.

## 7.4 Funcionamiento con acumulador

### **El acumulador de serie es cargado a través del adaptador de red entregado.**

Antes del primer uso el acumulador debería ser cargado por lo menos 15 horas a través del adaptador de red. El periodo de servicio del acumulador es aprox. 70 horas, el periodo de carga hasta la recarga completa aprox. 12 horas.

Función AUTO-OFF después de 15 min. para ahorrar batería.

Si en la indicación de peso aparece una flecha [▼] por cima del símbolo de batería 

la capacidad de la batería será agotada dentro de breve tiempo. La balanza queda lista para funcionar aprox. 10 horas, después desconecta automáticamente. Conecte el adaptador de red lo más pronto posible para cargar la batería.

La indicación LED bajo la ventana cantidad de piezas le informa sobre el estado de carga de la batería.

rojo: Batería casi descargada

verde: Batería completamente cargada

amarillo: La batería se debería cargar a través de mayor periodo (por la noche)

## 7.5 Conexión de aparatos periféricos

Antes de desconectar o conectar aparatos suplementarios (impresora, ordenador) al interfaz de datos, es necesario separar la balanza de la red eléctrica.

Utilice exclusivamente accesorios y equipo periférico de KERN, ya que éstos están adaptados óptimamente a los requisitos su balanza.

## 7.6 Primera puesta en servicio

Un tiempo de calentamiento de 5 minutos después del conectar estabiliza los valores de medición.

La precisión de la balanza depende de la aceleración de caída o gravedad existente en ese punto geográfico.





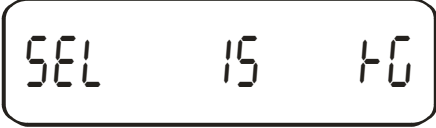

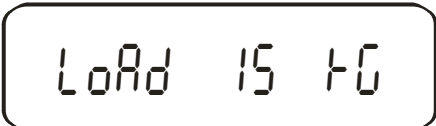
Leer obligatoriamente las indicaciones del capítulo "Ajuste".

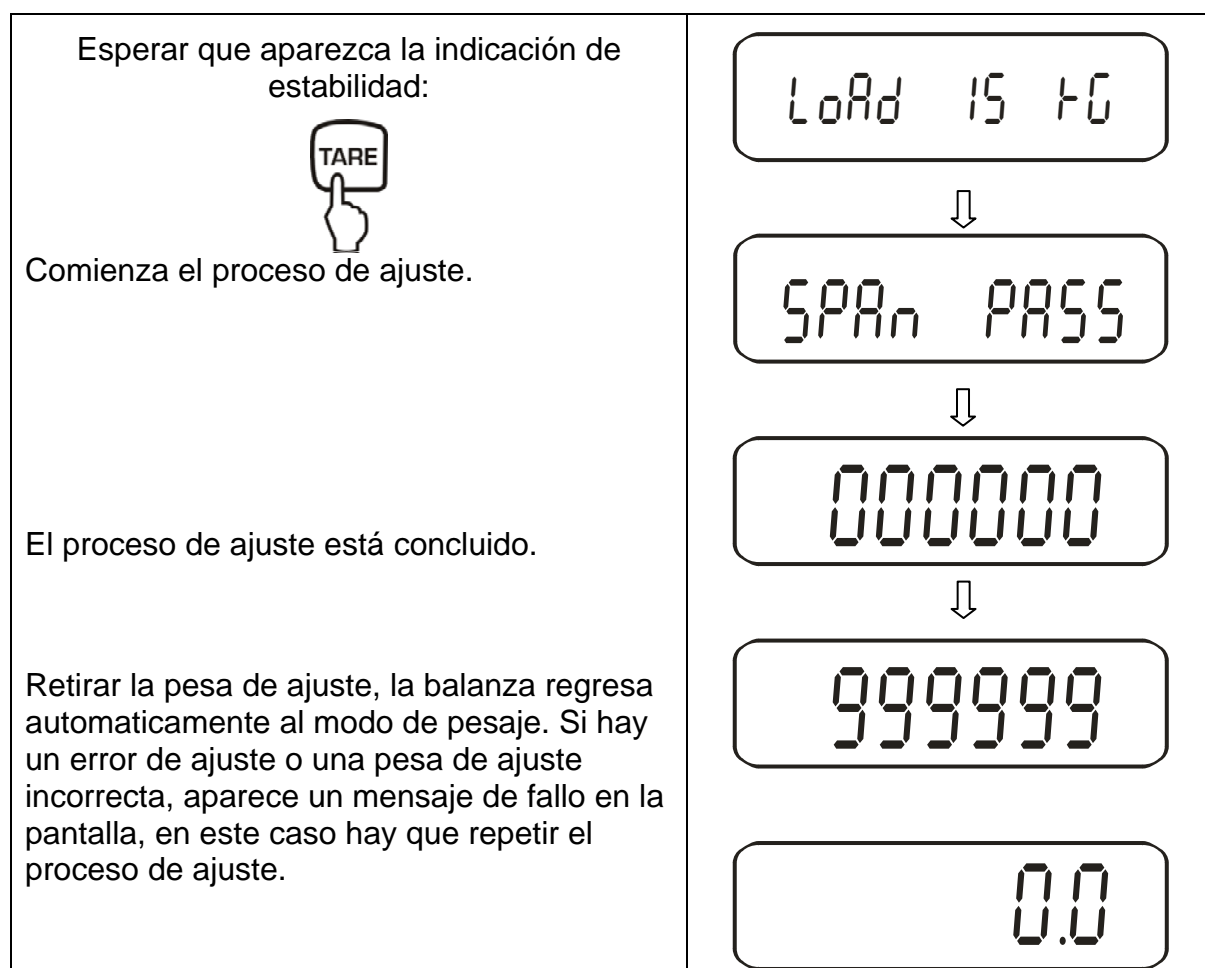
## 7.7 Ajuste con peso externo

Como la aceleración de la gravedad no es igual en todos los puntos de nuestro planeta, es necesario ajustar la balanza a la aceleración de la gravedad existente en el respectivo lugar de emplazamiento teniéndose en consideración el principio físico de pesaje en que se basa la misma (sólo si la balanza aún no ha sido ajustada en fábrica al respectivo lugar de emplazamiento). Este ajuste se tiene que efectuar en la puesta en marcha inicial de la balanza así como después de cada cambio del lugar de emplazamiento y para fluctuaciones de temperatura de los alrededores. Para obtener valores de medición exactos, también se recomienda ajustar la balanza de vez en cuando durante el pesaje.

### Procedimiento al ajustar:

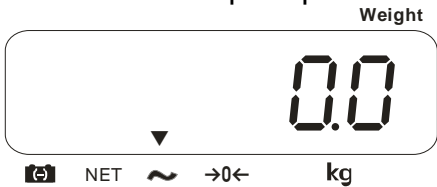

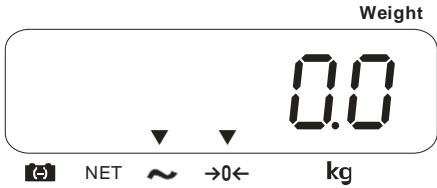
Observar las condiciones de estabilidad ambiental. Un tiempo de calentamiento de aprox. 10 minutos para la estabilización es necesario. Tenga atención que no se encuentre ningún objeto en el platillo de pesaje.

Manejo	Indicación
Activar función [F I] [CAL], ver cap. 10	
 Tenga atención que no se encuentre ningún objeto en el platillo de pesaje.	
 El punto cero es almacenado en memoria.	 La balanza le propone un valor de peso para el peso de ajuste. Sin embargo puede también entrar un valor de su selección a través de las teclas numéricas.
 Confirmar el valor de peso	 Colocar con cuidado la pesa de ajustar en el centro del platillo.

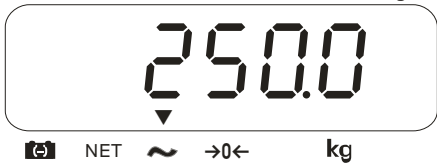


## 8 Pesaje

### 8.1 Conectar/desconectar y poner en cero

Manejo	Indicación
<p>1. Encender la balanza:</p> <p>Apretar interruptor <b>ON/OFF</b> y mantenerlo brevemente pulsado (en el lado inferior derecho de la balanza)</p> <p>La balanza efectúa un autotest.</p>	<p>Luego que aparece el indicador de peso "0" en todos los tres visores indicadores, su balanza está lista para pesar.</p> 
<p>2. Poner a cero</p> 	 <p>Aparecen el indicador cero y la flecha sobre el símbolo „→0←“.</p>



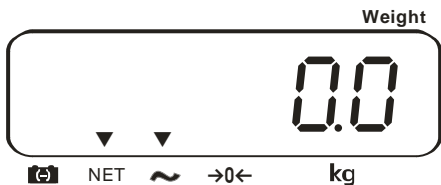
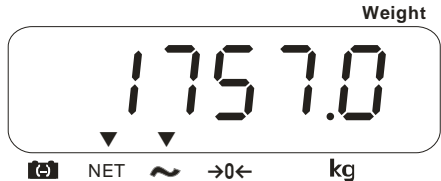
### 8.2 Pesaje simple

Manejo	Indicación
<p>Poner el material a pesar en el platillo de pesaje</p>	<p>Leer el resultado de pesaje</p>  <p>En caso de valores estables de pesaje aparece la flecha por cima del símbolo ~.</p>
<p>Si el material de pesaje está más pesado que la gama de pesaje, aparece en la pantalla "QL" (=sobrecarga) y suena un pito.</p>	


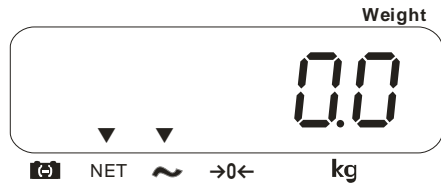
### 8.3 Pesaje con tara

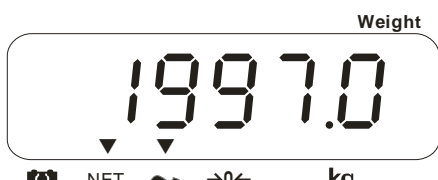
El peso propio de algunos recipientes de pesaje se puede deducir mediante apriete al botón para que en los pesajes siguientes se indique sólo el peso neto del material que se va a pesar.

#### 8.3.1 Averiguar el peso tara mediante pesaje

Manejo	Indicación
Colocar el recipiente a tarar vacío sobre el platillo de pesaje. El peso total del recipiente es indicado en la pantalla.	
Reponer la indicación a "0". 	 <p>El peso del recipiente ahora está almacenado en memoria. Aparecen el indicador cero y la flecha sobre el símbolo "NET".</p>
Coloque el material a pesar en el recipiente de taraje.	Lea ahora el peso del material a pesar en el indicador. 

El proceso de tara se puede repetir cualquier cantidad de veces, por ejemplo al tener que pesar varios componentes de una mezcla (agregándose los componentes sucesivamente).

Reponer la indicación a "0". 	 <p>El peso total del recipiente es tarado.</p>
---	---

Eche más componentes al recipiente de pesaje (agregar componentes sucesivamente).	<p>Lea el peso del componente añadido que ahora es indicado en la pantalla.</p> 
---	--

**Nota:**




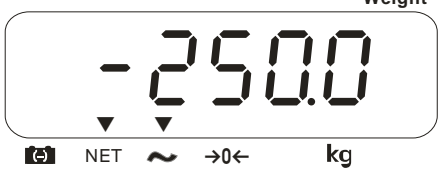

La balanza solamente puede almacenar un valor de tara a la vez.

Cuando la balanza no lleva peso encima, el valor de tara almacenado es indicado con signo negativo.

Para borrar el valor de tara almacenado se tiene que retirar el peso del platillo de pesaje y luego presionar la tecla TARE.

El proceso de tara se puede repetir cualquier cantidad de veces. El límite está alcanzado cuando toda la gama de pesaje está ocupada.

### 8.3.2 Entrada numérica del peso de tara




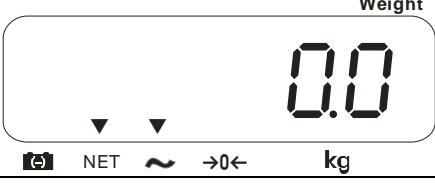


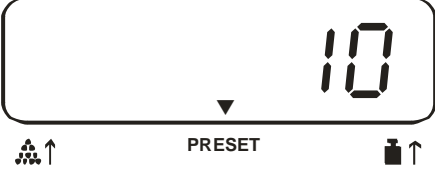

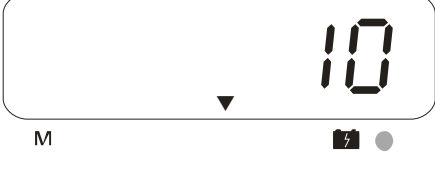
Manejo	Indicación
<p>Quite todos los objetos del platillo de pesaje.</p> 	
<p>Entre su peso tara a través de las teclas numéricas.</p>  <p>confirmar</p>	 <p>El peso tara es indicado como valor negativo</p>
<p>Poner recipiente tara + material a pesar</p>	<p>Se visualiza el peso neto del material de pesaje.</p> 



## 9 Contaje de piezas

Contaje de piezas significa que se pueden agregar o extraer piezas de un recipiente conociéndose siempre la respectiva cantidad. Para poder contar una cantidad de piezas elevada, es necesario determinar primero el peso medio de las piezas a base de una cantidad pequeña (número de piezas de referencia). Mientras más elevado sea el número de piezas de referencia, más precisos serán los resultados de contaje. En el caso de piezas pequeñas o de piezas de peso variable es necesario elegir una cantidad de referencia especialmente elevada.

### 9.1 Averiguar el peso referencial mediante pesaje

Manejo	Indicación
<p>Ponga la balanza en cero</p> 	
<p>Tarar el recipiente de pesaje:</p> 	
<p><b>Determinar el número de piezas de referencia:</b></p> <p>Poner cierta cantidad de piezas individuales como peso referencial</p> <p>Si la indicación de "<b>peso</b>" está estable, entre la cantidad de piezas individuales mediante las teclas numéricas.</p> <p>Confirmar dentro de 5 sec:</p>  <p>El peso de referencia es averiguado</p> <p>El número de piezas de referencia aparece en la pantalla "<b>cantidad de piezas</b>"</p>	 <p>Piece weight</p>  <p>Piece weight</p>  <p>Pcs</p> 

### Contar las piezas:

Ahora puede colocar las piezas a contar en el platillo de pesaje. Se indican todos los parámetros cantidad de piezas de su material a pesar:



### 9.2 Entrada numérica del peso referencial

Si le está conocido el peso referencial/pieza, lo puede entrar mediante las teclas numéricas.

#### Definir peso referencial:

Entrar peso referencial a través de las teclas numéricas

Confirmar dentro de 5 sec:



### Contar las piezas:

Ahora puede colocar las piezas a contar en el platillo de pesaje. Se indican todos los parámetros cantidad de piezas de su material a pesar:






### 9.3 Optimización referencial automática

Para optimizar automáticamente el peso referencial calculado, hay que poner más piezas cuya cantidad sea menor que la cantidad referencial memorizada. Suena una señal acústica cuando la referencia se optimiza. La optimización automática de referencia es desactivada luego que la cantidad de piezas sumadas excede la cantidad referencial memorizada.



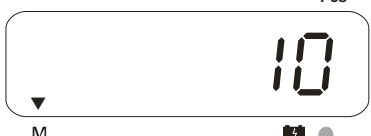
## 9.4 Control de tolerancia al contar piezas

Suena una señal acústica si la cantidad de piezas puestas alcanza un valor límite preajustado o lo excede.

<p><b>Determinar valor límite:</b></p> <p>Entrar valor límite a través de las teclas numéricas</p> <p>Confirmar dentro de 5 sec:</p> 	 <p>La flecha por cima del símbolo PRESET señala un valor límite memorizado.</p>
<p><b>Borrar valor límite:</b></p> <p>Entrar y confirmar valor límite "0"</p> 	

## 9.5 Almacén manual de sumas

Esta función le permite realizar varios pesajes. A continuación viene a saber la cantidad total de piezas y la cantidad de pesajes.

Activar función „F4 RU OFF“, ver cap. 10	
<p><b>1. Pesaje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione un peso referencial</li> <li>• Si utiliza un recipiente de pesaje, tararlo con la tecla TARE</li> <li>• Entre la deseada cantidad de piezas para el primer pesaje</li> <li>• Sumar valor de pesaje en el almacén</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descargue la balanza</li> </ul>	  <p>La flecha por cima del símbolo M señala un valor memorizado.</p>

## 2. Pesaje:

- Entre la deseada cantidad de piezas para el segundo pesaje
- Sumar valor de pesaje en el almacén



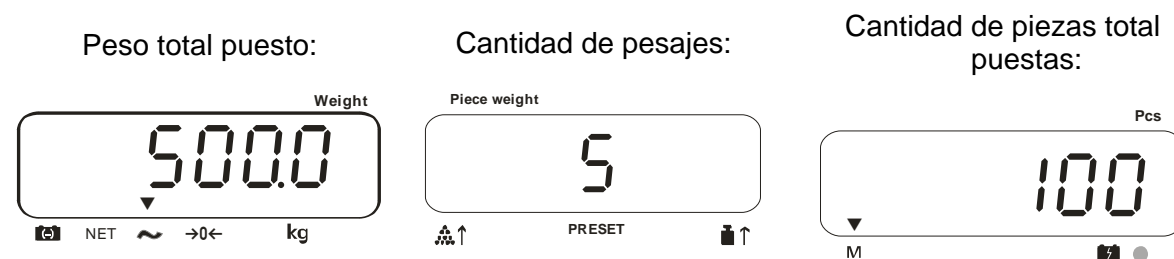
En caso de necesidad pese más piezas como descrito antes. Observe que la balanza debe ser descargada entre los pesajes individuales.

Este proceso puede ser repetido 99 veces hasta que la gama de pesaje de la balanza sea agotada.

### Indicación de sus datos de pesaje memorizados:



El peso total, la cantidad de pesajes y la cantidad total de piezas aparecen 2 sec. Al conectar una impresora se pueden imprimir los datos al apretar la tecla PRINT.



### Borrar sus datos de pesaje memorizados:






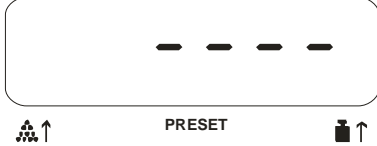
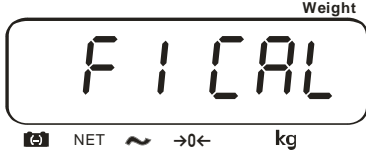




## 9.6 Almacén automático de sumas


Ejecución ver cap. 9.5, los individuales valores de pesaje, sin embargo, son automáticamente sumados al almacén de sumas sin apretar la tecla **M+**.

Activar función „**F4 RU on**“, ver cap. 10

## 10 Menú

### 10.1 Navegación en el menú


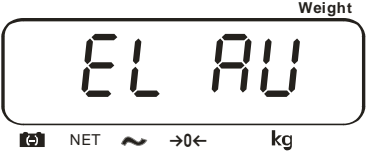


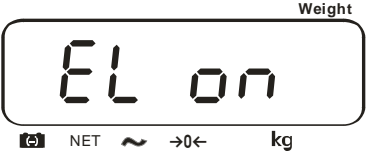
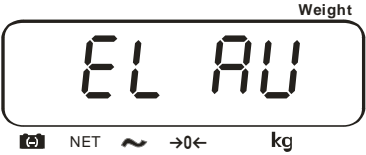

Manejo	Indicación
<p><b>Solicitud del menú:</b> Conectar balanza y apretar la tecla TARE durante la autopruueba</p> 	
<p>Mediante las tecla cifra entrar contraseña:</p> <p>ó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Contraseña estándar "0000"</li> <li>Contraseña personal, entrada bajo función [F5 P1 n]</li> </ul>  confirmar	<p>Piece weight</p>  <p>Aparece la primera función [F1 CAL]:</p> 
<p><b>Selección de funciones:</b></p>  <p>Al seguir pulsando la tecla REF se puede acceder a las diferentes funciones del menú (ver tabla cap. 10.2)</p>	 <p>↓</p> 
<p><b>Confirmar función:</b></p> 	<p>El punto actual de menú aparece</p>

<p><b>Selección de parámetros:</b></p> 	<div data-bbox="916 219 1283 421"> <p>Weight</p> <p>1 70 1</p> <p>NET ~ →0← kg</p> </div> <p>↓</p> <div data-bbox="916 432 1283 586"> <p>Weight</p> <p>1 70 5</p> <p>NET ~ →0← kg</p> </div>
<p><b>Memorizar su selección</b></p> 	
<p><b>Regresar al modo de pesaje</b></p> 	<div data-bbox="879 822 1318 1012"> <p>Weight</p> <p>0.0</p> <p>NET ~ →0← kg</p> </div>

## 10.2 Vista de conjunto del menú

Indicación	Selección	Descripción del funcionamiento
<i>F1 CLR</i>		Ajuste, ver cap. 7.7
<i>F2 dl</i>	<div>1 <i>INC</i> 1</div> <div>1 <i>INC</i> 2</div> <div>1 <i>INC</i> 5</div> <div>1 <i>INC</i> 10</div>	Indicación de la distancia graduada más pequeña
<i>F3 Cont</i>		No documentado
<i>F4 RU</i>	<div><i>RU</i> on</div> <div><i>RU</i> off</div> <div><i>P</i> Cont</div>	<div>Almacén automático de sumas, ver cap. 9.6</div> <div>Almacén manual de sumas, ver cap. 9.5</div> <div>Impreso continuo sin adición</div>
<i>F5 R20n</i>	<div>0.5d</div> <div>1d</div> <div>2d</div> <div>4d</div>	Ajuste gama auto-zero (ajuste estándar 1D)
<i>F6 PIN</i>		Entrada contraseña personal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apretar tecla TARE [<i>PIN</i> 1]</li> <li>• Entrada de contraseña a través de las teclas numéricas</li> <li>• Confirmar con la tecla TARE [<i>PIN</i> 2]</li> <li>• Repetir la contraseña y confirmar con la tecla TARE [<i>done</i>]</li> </ul>
<i>F7 SPD</i>	<div>7.5</div> <div>15</div> <div>30</div> <div>60</div>	Velocidad de indicación    Insensible pero lento <div>↓</div> Sensible y rápido

## 11 Iluminación del fondo de la indicación

Manejo	Indicación
 <p>Tener apretado 4 sec</p>	<p>Aparece al ajuste actual:</p> 
<p><b>Selección de su ajuste:</b></p>  <p>apretar hasta que aparezca su ajuste deseado</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iluminación del fondo desconectada            </li> <li>2. Iluminación del fondo conectada            </li> <li>3. Iluminación automática del fondo sólo al cargar el platillo de pesaje o al apretar una tecla            </li> </ol>
<p><b>Memorizar sus ajustes:</b></p> 	

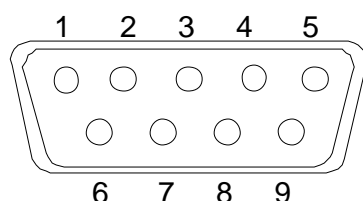


## 12 Salida de datos RS 232 C

### 12.1 Datos técnicos

- Código ASCII
- 8 bits datos
- Ningún bit de paridad
- Cuota baud 4800 baud

### 12.2 Dotación de los pines del conector salida de la balanza (vista frontal)



Pin 2: Receive data  
Pin 3: Transmit data  
Pin 5: Signal ground

### 12.3 Formato de datos

- Emisión normal de datos: o

Ejem.:

GS	1.234 kg	Peso bruto
U.W.	123 g	(NT significa peso neto)
PCS	10	kg/g
<lf>		Pzas.
<lf>		2 avances de renglón

- Emisión datos Almacén de sumas: e

Ejem.:

*****		
<lf>		1 avance de renglón
TOTAL		
Nr.	5	
Wgt	1.234 kg	
PCS	10	Pzas.
<lf>		1 avance de renglón
*****		

## **13 Mantenimiento, conservación, eliminación**

### **13.1 Limpiar**

Antes de la limpieza hay que separar el aparato de la red eléctrica.

No utilice detergentes agresivos (disolventes o cosas por el estilo), sino solamente un paño humedecido con una lejía de jabón suave. Preste atención de que ningún líquido entre al interior del aparato. Seque las superficies con un paño seco, suave y limpio.

Elimine restos de pruebas o polvos con cuidado utilizando un pincel o una aspiradora de mano.

**Eliminar de inmediato material de pesaje derramado.**

### **13.2 Mantenimiento, conservación**

Sólo técnicos de servicio capacitados y autorizados por la empresa KERN deben abrir el aparato.

Separar el aparato de la red eléctrica antes de abrirlo.

### **13.3 Remoción**

El explotador debe eliminar el embalaje y/o la balanza conforme a las leyes nacionales o regionales vigentes en el lugar de uso del aparato.

## 14 Pequeño servicio de auxilio

En caso de avería en la secuencia de programa, se tiene que apagar la balanza y desconectarla de la red por unos segundos. Esto significa que se tiene que volver a efectuar el proceso de pesaje desde el principio.

<b>Avería</b>	<b>Causa posible</b>
<i>La indicación de peso no ilumina.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La balanza no está encendida.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La conexión entre balanza y red eléctrica está interrumpida (cable de la red no enchufado o defectuoso).</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Ha habido un apagón.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Las baterías están mal puestas o vacías</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>No se han puesto baterías</i></li> </ul>
<i>La indicación del peso cambia siempre</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Corriente de aire / circulación de aire</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vibraciones de la mesa / del suelo</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El platillo de pesaje tiene contacto con cuerpos ajenos.</i></li> <li>• <i>Campos electromagnéticos / carga electrostática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las perturbaciones)</i></li> </ul>
<i>El resultado del pesaje obviamente está mal</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La indicación de la balanza no se encuentra en el punto cero.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>El ajuste ya no está correcto.</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Existen fuertes oscilaciones de temperatura.</i></li> <li>• <i>Campos electromagnéticos / carga electrostática (elegir otro lugar de emplazamiento; si es posible, desconectar el aparato causante de las perturbaciones)</i></li> </ul>

<b>Mensaje de error</b>	<b>Descripción</b>	<b>Posibles causas</b>
<b>Err4</b>	<i>Puntos cero sólo en gama admitida (4% de la gama max. de pesaje) y no en sobrecarga/carga insuficiente</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objeto en el platillo de pesaje</li> <li>• Sobrecarga en posiciones cero</li> <li>• Ajuste no profesional</li> <li>• Célula de pesaje dañada</li> <li>• Electrónica dañada</li> </ul>
<b>Err5</b>	<i>Fallo de teclado</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manejo no profesional de la balanza</li> </ul>
<b>Err6</b>	<i>Valor fuera de gama convertidor A/D</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Platillo de pesaje no instalado</li> <li>• Célula de pesaje dañada</li> <li>• Electrónica dañada</li> </ul>
<b>FAIL H o FAIL L</b>	<i>Fallo de ajuste</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste no profesional</li> <li>• Divergencia del ajuste de fábrica &gt; 10%</li> </ul>
<b>Err8</b>	<i>Fallo de ajuste</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste no profesional</li> <li>• Peso de ajuste incorrecto</li> <li>• Balanza inestable</li> </ul>
<b>Err9</b>	<i>Resultato de pesaje inestable</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corriente de aire / circulación de aire</li> <li>• Vibraciones de la mesa / del suelo</li> </ul>

En caso de que aparezcan otros avisos de error, desconectar la balanza y volverla a conectar. Si el aviso de error no desaparece, informar al fabricante de la balanza.